


SONICflex[®] Spitzenbuch.



Ausführliche
Anwenderberichte
zu den
KaVo Spitzen unter
www.kavo.com/spitzen



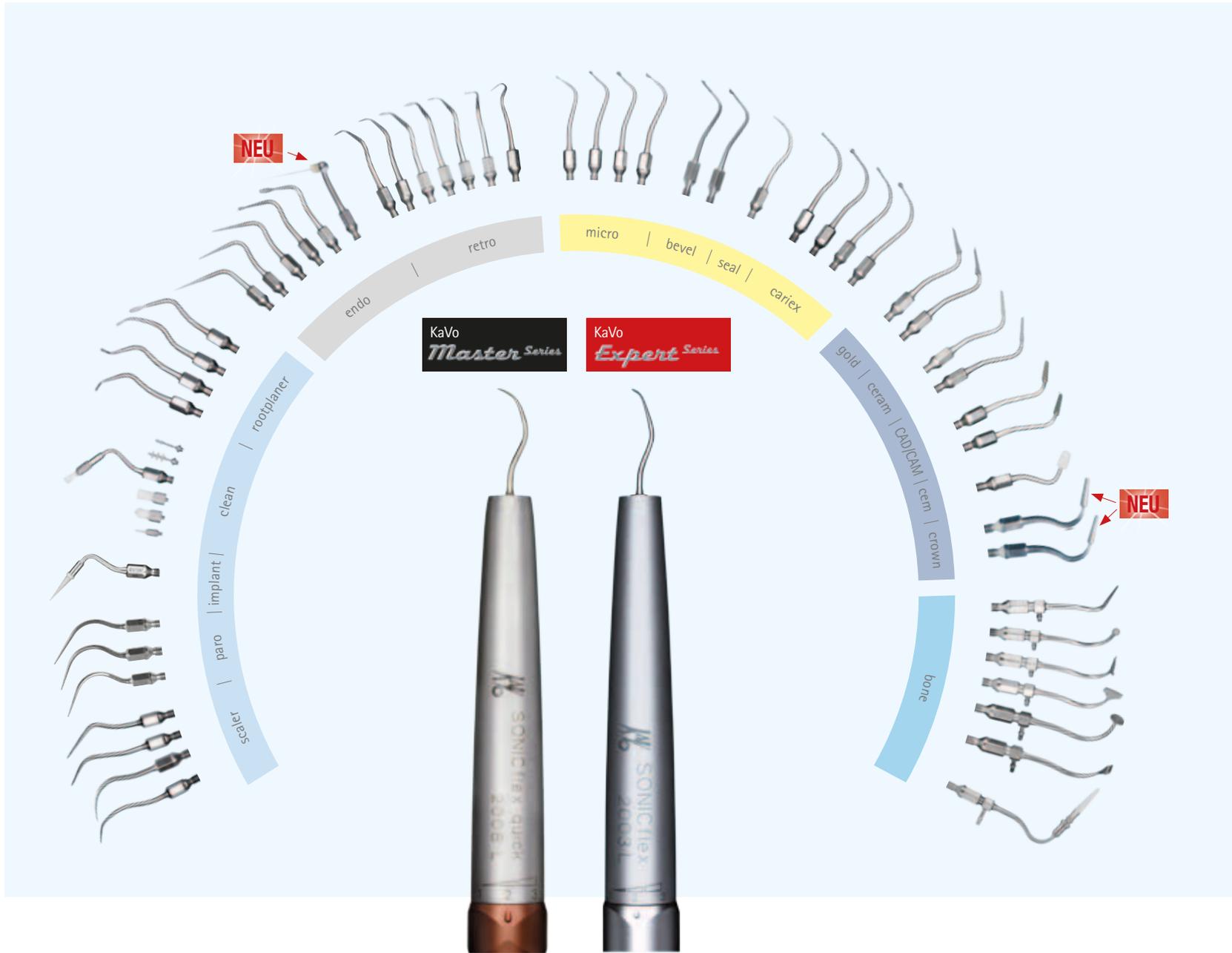

**Vielfältigkeit –
auf die Spitze gebracht.**

Durch die umfassenden Möglichkeiten, die Sie mit SONICflex haben, wird es schon in Kürze eines Ihrer am meisten eingesetzten Instrumente.

Dank zahlreicher Spitzen stellt es sich exakt auf Ihren Bedarf ein.

**Zahlreiche Möglichkeiten –
Höhepunkte und Vorteile für Sie:**

- Mehr Spitzen und damit mehr Einsatzmöglichkeiten als alle anderen Airscaler
- Über 50 verschiedene Spitzen
- Für sämtliche Anwendungsbereiche
- Die Grundlage für eine erfolgreiche minimalinvasive Behandlung



SONICflex® Instrumentenübersicht.

KaVo *Master Series*



Schneller komfortabler Spitzenwechsel – nur eine Umdrehung auch mit Anschluss für Sirona Kupplungen

KaVo *Expert Series*



KaVo *Smart Series*



Ihr täglicher Vorsprung in Sachen Leistungsstärke.

Mit Ihrem KaVo SONICflex verfügen Sie über den stärksten und leisesten Airscaler seiner Klasse. Er ist mit Sicherheit das Instrument mit dem breitesten Einsatzspektrum. Er unterstützt Sie tatkräftig mit einstellbaren Leistungsstufen, je nach Indikation – stark und präzise.

Überlegene Technik – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- In drei Stufen regulierbare Leistung – optimale Arbeitsbedingung bei jeder Indikation
- Wesentlich leiser als vergleichbare Anbieter (bis zu 15 dB) – Gesundheitsschutz für Praxisteam und Patienten
- Keine Zusatzgeräte notwendig, einfach auf die KaVo MULTIflex oder Sirona Kupplung stecken – ganz ohne lästiges Kabelgewirr
- Beste Ausleuchtung: 25.000 Lux – für entspannte Sicht ohne Ermüdung der Augen
- Sprichwörtliche KaVo-Qualität – SONICflex 2008 L ist bereits die dritte Scaler-Generation bei KaVo, 25 Jahre Wissen und Erfahrung sind darin gebündelt



SONICflex scaler Spitze Nr. 5

Behandlung: zum Entfernen von großflächigem Zahnstein
Form: Universal



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5171
1.005.8949

SONICflex scaler Spitze Nr. 8

Behandlung: zum Entfernen von supra- und subgingivalen Zahnstein
Form: Perio, extra lang



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5371
1.006.1953

SONICflex scaler Spitze Nr. 6

Behandlung: zum Entfernen von großflächigem, supragingivalen Zahnstein
Form: Sichel



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5181
1.005.8950

SONICflex scaler Spitze Nr. 7

Behandlung: zum Entfernen von großflächigem, supragingivalen Zahnstein
Form: Perio



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5191
1.005.8951

SONICflex scaler Spitze Nr. 48

Behandlung: Belagsentfernung, Fissurenreinigung, Kavitäten- und Kronenstumpfreinigung
Form: verschiedene Aufsätze, Einweg Bürsten



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
clean Bürste Nr. 1
clean Bürste Nr. 2
clean Bürste Nr. 3
clean Bürste Nr. 4
clean Bürste Nr. 5
clean Bürste Nr. 6
Spitze Nr. 48
Spitze Nr. 48 A



0.571.0001
1.006.2026
0.571.0402
0.571.0412
0.571.0422
0.571.0432
0.571.0472
0.571.0482
0.571.0401
1.006.1982

Prophylaxe

SONICflex paro Spitze Nr. 60

Behandlung: schonende Taschenreinigung in der PA Therapie; effektive Taschenreinigung bis zu 9 mm Tiefe; Für Frontzahnbereich, Glattflächen

Form: lange, gerade Spitze - abgerundete Oberfläche



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7402
1.006.1934

SONICflex paro Spitze Nr. 61

Behandlung: schonende Taschenreinigung in der PA Therapie; effektive Taschenreinigung bis zu 9 mm Tiefe; vom ersten Quadrant bis zum mittleren Schneidezahn von bukkal, im weiteren Verlauf dann die Frontzähne, Prämolaren und Molaren des zweiten Quadranten von palatinal reinigen

Form: abgewinkelte Spitze, links - abgerundete Oberfläche



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7412
1.006.1935

SONICflex paro Spitze Nr. 62

Behandlung: schonende Taschenreinigung in der PA Therapie; effektive Taschenreinigung bis zu 9 mm Tiefe; vom ersten Quadrant bis zum mittleren Schneidezahn von bukkal, im weiteren Verlauf dann die Frontzähne, Prämolaren und Molaren des zweiten Quadranten von palatinal reinigen

Form: abgewinkelte Spitze, rechts - abgerundete Oberfläche



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7422
1.006.1936

SONICflex implant Spitze

Behandlung: Effektives Entfernen von subgingivalen Belägen und Konkrementen bei Implantaten

Form: keilförmige Spitzen, Einweg-Kunststoffansatz (PEEK)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Einweg Kunststoffansatz (30 St.)

1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

Parodontologie

SONICflex rootplaner Spitze Nr. 24

Behandlung: für schwer zugängliche Furkationen, ermöglicht auch bei geschlossener Zahnreihe den Zugang zu den approximalen Furkationseingängen

Form: kontrawinkelige Knospe, klein, **links**, Diamantierung D25



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621
1.006.1957

SONICflex rootplaner Spitze Nr. 27

Behandlung: effektive Reinigung von Glattflächen und Konkavitäten

Form: extra lang perio, Knospe, **groß**; Diamantierung D25



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651
1.006.1963

SONICflex rootplaner Spitze Nr. 25

Behandlung: für schwer zugängliche Furkationen, ermöglicht auch bei geschlossener Zahnreihe den Zugang zu den approximalen Furkationseingängen

Form: kontrawinkelige Knospe, klein, **rechts**; Diamantierung D25




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631
1.006.1959

SONICflex rootplaner Spitze Nr. 26

Behandlung: effektive Reinigung von Glattflächen und Konkavitäten

Form: universal, Knospe, **klein**; Diamantierung D25

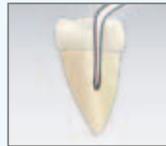

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641
1.006.1961

Parodontologie

SONICflex micro Spitze Nr. 30

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies
 Form: kleine Halbkugel, **mesial**, Diamantierung D46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6811
 1.006.1969

SONICflex micro Spitze Nr. 33

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies
 Form: große Halbkugel, **distal**, Diamantierung D46

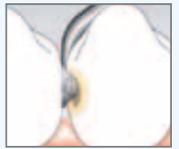

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6821
 1.006.1975

SONICflex micro Spitze Nr. 31

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies
 Form: kleine Halbkugel, **distal**, Diamantierung D46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6801
 1.006.1971

SONICflex bevel Spitze Nr. 58

Behandlung: proximale Kavitätenränder werden abgeschrägt
 Form: **mesial**, Diamantierung D46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7392
 1.006.1988

SONICflex micro Spitze Nr. 32

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies
 Form: große Halbkugel, **mesial**, Diamantierung D46

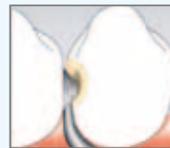

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6831
 1.006.1973

SONICflex bevel Spitze Nr. 59

Behandlung: proximale Kavitätenränder werden abgeschrägt
 Form: **distal**, Diamantierung D46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7382
 1.006.1990

Minimalinvasiv

SONICflex seal Spitze Nr. 45

Behandlung: minimalinvasives Aufbereiten von Fissuren, schmerzfreies Aufziehen von Fissuren
 Form: konisch, gerade Spitze Ø 0,5 mm, Diamantierung D 46

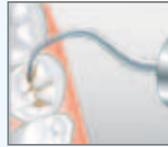

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.8323
 1.007.1506

SONICflex carieux TC Spitze Nr. 71

Behandlung: schichtweise Entfernung des Hauptteils der kariösen Substanz
 Form: Kugelform, Ø 1,0 mm, Hartmetall




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7362
 1.006.2002

SONICflex carieux D Spitze Nr. 42

Behandlung: substanzschonende, sonoabrasive Kariesexkavation fein
 Form: Kugelform, Ø 0,8 mm, Diamantierung D 46

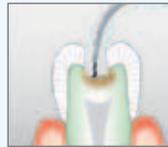


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7105
 1.006.1980

SONICflex carieux TC Spitze Nr. 72

Behandlung: schichtweise Entfernung des Hauptteils der kariösen Substanz
 Form: Kugelform, Ø 1,4 mm, Hartmetall

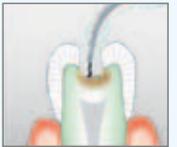


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7363
 1.006.2004

SONICflex carieux D Spitze Nr. 43

Behandlung: substanzschonende, sonoabrasive Kariesexkavation fein
 Form: Kugelform, Ø 1,2 mm, Diamantierung D 64

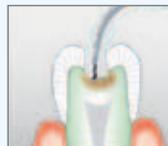

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.7167
 1.006.1981

Minimalinvasiv

SONICflex prep gold Spitze Nr. 49 mesial

Behandlung: präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich nach der rotierend durchgeführten „Grobpräparation“; dadurch ist eine bessere zahntechnische Restauration möglich

Form: **mesial**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln: lateral - 60°, zervikal - 75°, Diamantierung D 46

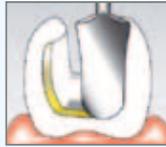

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212
1.006.1983

SONICflex prep ceram Spitze Nr. 52

Behandlung: präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich, harmonische Übergänge der zervikalen und lateralen Randbereiche

Form: **distal**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln, lateral - 60°, zervikal - 75°, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7272
1.006.1986

SONICflex prep gold Spitze Nr. 50 distal

Behandlung: präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich nach der rotierend durchgeführten „Grobpräparation“, dadurch ist eine bessere zahntechnische Restauration möglich

Form: **distal**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln: lateral - 60°, zervikal - 75°, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222
1.006.1984

SONICflex prep ceram Spitze Nr. 51

Behandlung: Präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich, harmonische Übergänge der zervikalen und lateralen Randbereiche

Form: **mesial**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln: lateral - 60°, zervikal - 75°, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7262
1.006.1985

Prothetik

SONICflex prep CAD / CAM Spitze Nr. 34

Behandlung: perfekte Abstimmung der Kavitätenpräparation auf arbeitstechnische Prozesse in CAD-CAM-Systemen

Form: **mesial**, lateraler Winkel 60°, zervikaler Winkel 90°, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.002.1984
1.006.1977

SONICflex prep CAD / CAM Spitze Nr. 35

Behandlung: perfekte Abstimmung der Kavitätenpräparation auf arbeitstechnische Prozesse in CAD-CAM-Systemen

Form: **distal**, lateraler Winkel 60°, zervikaler Winkel 90°, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.002.1986
1.006.1979

SONICflex cem Spitze Nr. 12

Behandlung: schonendes Einsetzen von Inlays

Form: abgerundete Kunststoffkappe



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
CEM Aufsatz

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

SONICflex crown prep Spitze Nr.97

*ab 16. Mai erhältlich

Behandlung: Kronenstumpfpräparation - Ideal für diese Indikation ist die Kombination rotierender Kronenstumpf- Präparationsinstrumente und formgleicher Schallspitzen.

Form: Radius, Diamantierung D46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L und 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.008.6383
1.008.6384

SONICflex crown prep Spitze Nr.98

*ab 16. Mai erhältlich

Behandlung: Kronenstumpfpräparation - Ideal für diese Indikation ist die Kombination rotierender Kronenstumpf- Präparationsinstrumente und formgleicher Schallspitzen.

Form: Radius, Diamantierung D46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L und 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S

1.008.6385
1.008.6386

Prothetik

SONICflex retro Spitze Nr. 56

Behandlung: Aufsuchen / Finden des Wurzelkanals.
Wesentliche Arbeitserleichterung einer echten retrograden Kavitätenpräparation
Form: extrem schmale zylindrische Spitze, **links**, Diamantierung D 46

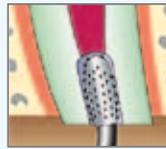


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7322
1.006.2040

SONICflex retro Spitze Nr. 17

Behandlung: Präparation des Wurzelkanals, deutlich erleichteter Zugang bei starker Wurzelkrümmung
Form: **rechts**, kleiner Zylinder, Diamantierung D 64

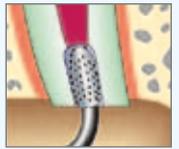


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5581
1.006.2035

SONICflex retro Spitze Nr. 57

Behandlung: Aufsuchen / Finden des Wurzelkanals.
Wesentliche Arbeitserleichterung einer echten retrograden Kavitätenpräparation
Form: schmale zylindrische Spitze, **rechts**, Diamantierung D 46

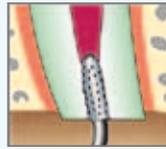


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7332
1.006.2041

SONICflex retro Spitze Nr. 20 und Nr. 21

Behandlung: Präparation des Unterschnitts. Achsengerechte Wurzelkanalaufbereitung bei minimalem Knochendefekt
Form: birnenförmig, **klein, links** (Nr. 20), **rechts** (Nr. 21), Diamantierung D 64

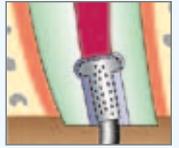

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5521
1.006.2037




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5561
1.006.2038

SONICflex retro Spitze Nr. 16

Behandlung: Präparation des Wurzelkanals, deutlich erleichteter Zugang bei starker Wurzelkrümmung
Form: **links**, kleiner Zylinder, Diamantiert D 64

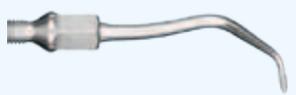


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5541
1.006.2036

SONICflex retro Spitze Nr. 55

Behandlung: für Wurzeln, deren Apices stark nach oral geneigt sind
Form: Diamantierung D 46

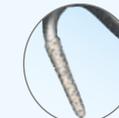

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7342
1.006.2039

Wurzelspitzenresektion

SONICflex endo Spitze Nr. 66

Behandlung: Ausgestaltung der Zugangskavität, Entfernung von Überhängen
 Form: Knospe, **groß**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.5825
1.006.1992

SONICflex endo Spitze Nr. 67

Behandlung: Erweiterung größerer Kanäle
 Form: konisch **125°**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

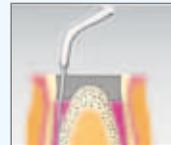

1.000.5822
1.006.1994

SONICflex endo Spitze Nr. 68

Behandlung: Erweiterung größerer Kanäle
 Form: konisch **112°**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.5823
1.006.1996

SONICflex endo Spitze Nr. 69

Behandlung: Entfernen von Resten der Wurzelkanalfüllung
 Form: Knospe, **klein**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5827
1.006.1998

SONICflex endo Spitze Nr. 70

Behandlung: für besonders lange und weite Kanäle
 Form: konisch **117°**, Diamantierung D 25
 vorderer Bereich ist nicht diamantiert



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5821
1.006.2000

SONICflex Spitze Endo clean Nr. 96

*ab 16. Mai erhältlich

Behandlung: zur Wurzelkanalspülung, zum Entfernen von Debris und smear layer sowie Steigerung der antibakteriellen Spüllösung

Form: 105° bzw. 75° Winkel



Bestellnummer: passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex Endo clean set A **1.007.1142**
 SONICflex Endo clean Spitze A **1.008.5164**
 passend für SONICflex 2000 N / L und 2003 / L
 SONICflex Endo clean Spitze **1.008.5163**
 SONICflex Endo clean set **1.006.2045**

Endo clean Nadeln für SONICflex 2000 N / L, 2003 und 2008
 SONICflex Endo clean 015 weiß **1.006.2042**
 SONICflex Endo clean 020 gelb **1.006.2043**
 SONICflex Endo clean 025 rot **1.006.2044**



Endodontie

SONICflex bone Spitze Nr. 80

Behandlung: Durchtrennung Sharpey'scher Fasern. Aufweitung der Alveole: Entfernung von Wurzelresten; Schonende Extraktion vor Implantation; Bonesplitting

Form: Vierkant, schneidend



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3875
1.006.2006

SONICflex bone Spitze Nr. 84

Behandlung: Entnahme von Knochenblöcken, Osteotomien (Distraction, Bonesplitting). Bei extrem dicker Kortikalis ggfs. rotierend vorarbeiten

Form: Säge axial



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3879
1.006.2014

SONICflex bone Spitze Nr. 81

Behandlung: Präparation des knöchernen Fensters für den Sinuslift. Bei sehr massivem Knochen ggfs. rotierend die Kortikalis durchtrennen und mit der diamantierten Spitze den verbliebenen Knochen entfernen

Form: Kugel, groß, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3876
1.006.2008

SONICflex bone Spitze Nr. 85

Behandlung: Ideal zum sicheren Ablösen der Schneider'schen Membran beim Sinuslift durch die tellerartige Form

Form: Elefantenfuß



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0645
1.007.1624

SONICflex bone Spitze Nr. 83

Behandlung: Entnahme von Knochenblöcken, Osteotomien (Distraction, Bonesplitting). Bei extrem dicker Kortikalis ggfs. rotierend vorarbeiten

Form: Säge sagittal



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3878
1.006.2012

Chirurgie

SONICflex bone Spitze Nr. 86

Behandlung: Ideal zur leichten und schnellen Gewinnung größerer Knochenmengen, speziell für Knochenaugmentation
 Form: Schaber



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0741
 1.007.1625

SONICflex bone Spitze Nr. 87

Behandlung: Ideal für schmale Schnitte, zum Lösen der Ligamente
 Form: Säge axial, wechselbare Sägeblätter
 Sägeblattstärke: 0,15 mm



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
 Sägeblatt (5 Stück)

1.006.1406
 1.007.1627
 1.006.1405

Zubehör:



Bestellnummer: Drehmomentschlüssel

1.000.4887



Bestellnummer: Steri - Kassette

0.411.9101



Bestellnummer: Schlüssel

0.411.0892



Bestellnummer: Zwischenstück zur Zufuhr medikamentöser Flüssigkeit für SONICflex 2003
 Zwischenstück zur Zufuhr medikamentöser Flüssigkeit für SONICflex 2008

1.000.6296
 1.006.5966

Chirurgie



KaVo. Dental Excellence.